



thermage®
FLX

Pionier und ein führender
Anbieter auf dem Gebiet
der nicht invasiven
Hautstraffung.

DAS ORIGINAL
-JETZT NOCH BESSER!

Tara
Modell mit Behandlungserfahrung

ÜBER

thermage®
FLX



THERMAGE® FLX
ist ein monopolares
Radiofrequenz System mit
kapazitiver Kopplung für die
nicht-invasive Hautstraffung.

THERMAGE® FLX ermöglicht
die Straffung der Haut² in nur
einer einzigen Sitzung – für ein
jüngeres Erscheinungsbild
ohne bzw. nur mit
minimaler Ausfallzeit^{2,3}.

HIGHLIGHTS



Bereits mehr als
3.3 Millionen*
Behandlungen
weltweit



Über 20 Jahre
Weiterentwicklung
und Kompetenz



Minimale Ausfallzeit³

Wegweisend seit
2002**

Eine einzige
Behandlung

Geeignet für
alle Hauttypen,
Behandlungsareale
und für alle
Jahreszeiten



*Vertriebsdaten. **Die erste Version von Thermage® wurde 2002 in den USA eingeführt.



KÜRZERE BEHANDLUNGSZEIT¹

Bis zu 25 % kürzere
Behandlungsdauer mit dem
Total Tip 4.0 cm² *



OPTIMIERTER BEHANDLUNGSVERLAUF⁵

Multidirektionale Vibration für
Patientenkomfort.**



HÖHERE BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Leichteres, ergonomisches
Handstück mit
multidirektionaler Vibration



OPTIMIERTE IMPULSABGABE

AccuREP™-Technologie
ermöglicht die automatische
Kalibrierung⁴



VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Ein Handstück für die Behandlung
von Gesicht, Augen und Körper



EINFACHE BEDIENUNG

Großer Touchscreen mit
benutzerfreundlicher
Oberfläche

¹Deckt eine 33 % größere Oberfläche ab als der Total Tip 3,0 cm². ²In Kombination mit dem Eye Tip 0.25 ist die Handstück-Vibrationsfunktion nicht verfügbar.
³Alle Daten beziehen sich auf den Vergleich mit dem Thermage®CPT-System und dessen Bestandteile.

FUNKTIONSWEISE

1

Der Applikator wird mit dem Handstück auf die Haut aufgesetzt



2

Die Vibration kann nun aktiviert werden und die Kühlung wird zum Schutz der Epidermis initiiert.



3

Unter fortlaufender Vibration dringt die erzeugte Wärme tief in das Gewebe ein.



4

Parallel zu Tiefenerwärmung und Vibration wird die Epidermis in drei Schüben gekühlt.



5

Abschließend erfolgt eine letzte Kühlung der Epidermis ohne die Weiterführung der Vibration.



VERSCHIEDENE BEHANDLUNGSOPTIONEN FÜR GESICHT, AUGEN UND KÖRPER

thermage®
FLX



TOTAL TIP 4.0cm²

Eine bis zu 25 % kürzere*
Behandlungsdauer als mit dem Total Tip
3.0. Gezielte thermische Behandlung
zur Therapie von Linien und Falten
und Vibrationsfunktion für einen
angenehmeren Behandlungsverlauf



EYE TIP 0.25cm²

Präzise, weniger tief in das Gewebe
eindringende Thermalbehandlung von
Falten in der periorbitalen Region und /
oder am Augenlid selbst.



BODY TIP 16.0cm²

Verstärkte Vibration für effektive⁶
und schmerzreduzierte⁴
Behandlungen am Körper



TOTAL TIP 3.0cm²

Gezielte thermische Behandlung
von Falten und Linien mit
Vibrationfunktion³

* Im Vergleich zum Thermage® CPT-System

** Der Eye Tip hat keine Vibrationsfunktion

thermage®
FLX


WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE BEHANDLUNG



*REPs: Anzahl der von einem Aufsatz abgegebenen Hochfrequenzenergie-Impulse.

ZUFRIEDENHEIT IHRER PATIENTEN
AN HÖCHSTER STELLE

thermage®
FLX

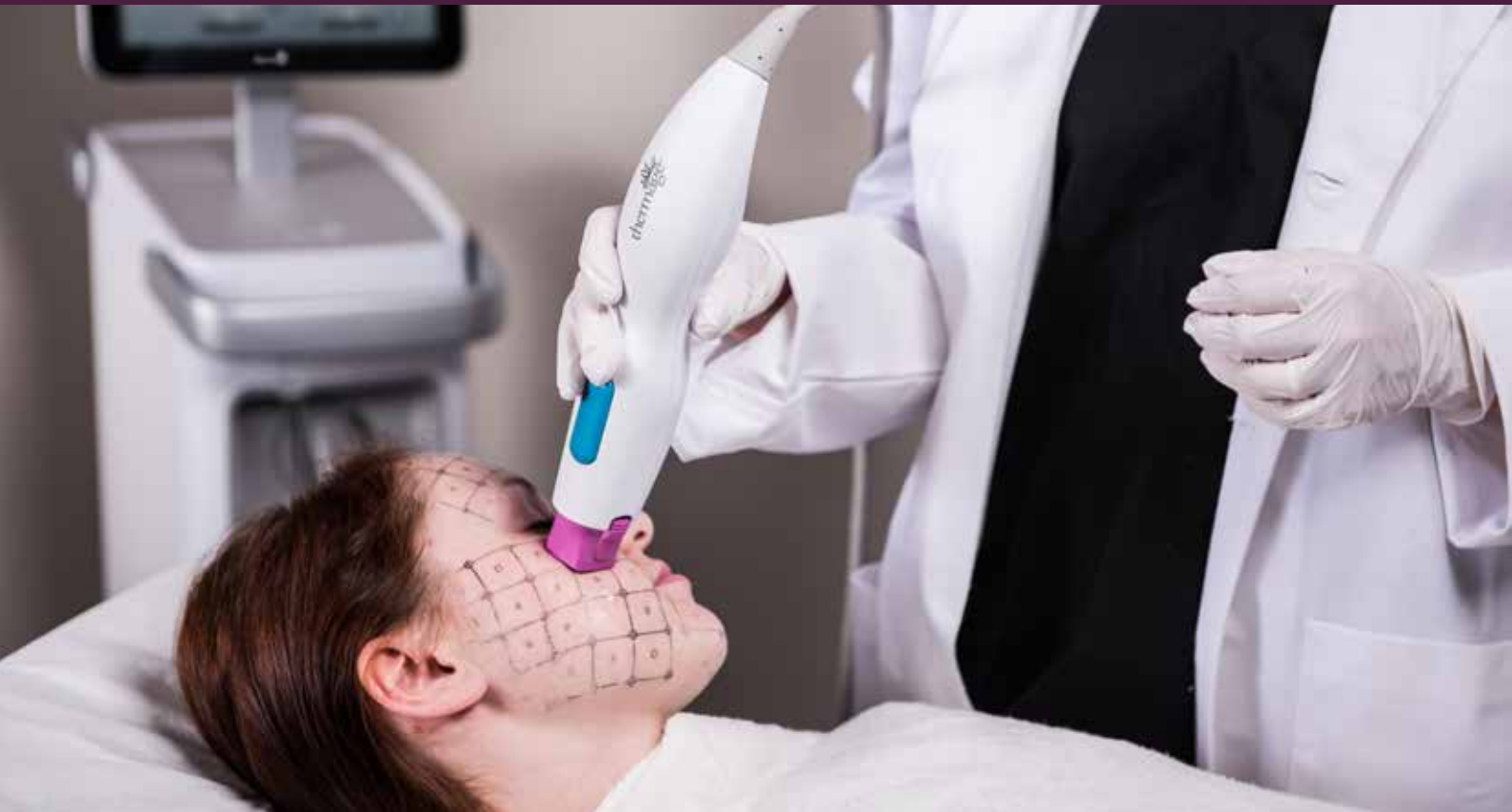

KEINE OP, KEINE INJEKTIONEN



MINIMALE AUSFALLZEIT³



EINE EINZIGE BEHANDLUNG



**SOFORT SICHTBARE, BLEIBENDE
ERGEBNISSE^{2,3}**



SCHNELL UND KOMFORTABEL⁵

BEHANDLUNG VERSCHIEDENSTER KÖRPERZONEN

thermage®
FLX

- STIRN
 - AUGENLIDER
 - BEREICH UNTER DEN AUGEN
 - GESICHT
 - JAWLINE
-

- HALS
 - HÄNDE
-

- ARME
 - ABDOMEN UND FLANKEN
 - GESÄß
 - SCHENKEL
 - KNIE
-



ERGEBNISSE NACH DER GESICHTSBEHANDLUNG



GESICHT: Weichere Linien in der Mund-, Augen- und Stirnpartie; stärkere Definition der Kieferpartie.



Vorher



10 Monate nach der Behandlung

Photographs courtesy of Solta Medical® Aesthetic Center



Vorher



3 Monate nach der Behandlung

Photographs courtesy of Solta Medical® Aesthetic Center

AUGEN: Reduktion von Falten und Minderung von Schlupflidern für einen geöffneten Blick und frischeres Aussehen



Vorher



3 Monate nach der Behandlung

Fotos: Solta Medical® Aesthetic Center



Vorher



6 Monate nach der Behandlung

Fotos: Solta Medical® Aesthetic Center

Die Fotos wurden nicht retuschiert. Die erzielten Ergebnisse können sich von Person zu Person unterscheiden. Die Auswahl der Vorher-Nachher-Bilder können Ergebnisse abbilden, die mit Thermage®-Geräten verschiedener Generationen (CPT, FLX usw.) erzielt wurden.

ERGEBNISSE NACH DER KÖRPERBEHANDLUNG

thermage®
FLX

KÖRPER: Klarer definierte Konturen und Reduktion von Hautfalten, straffere Haut am Bauch und an den Beinen.



Vorher



3 Monate nach der Behandlung

Fotos: Solta Medical® Aesthetic Center



Vorher



12 Monate nach der Behandlung

Fotos: Solta Medical® Aesthetic Center

Die Fotos wurden nicht retuschiert. Die erzielten Ergebnisse können sich von Person zu Person unterscheiden. Die Auswahl der Vorher-Nachher-Bilder können Ergebnisse abbilden, die mit Thermage®-Geräten verschiedener Generationen (CPT, FLX usw.) erzielt wurden.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

INDIKATIONEN

Die Komponenten der Radiofrequenz Technologie des THERMAGE® FLX-Systems sowie das entsprechende Zubehör sind für folgende Behandlungen indiziert:

- Nicht invasive Behandlung von periorbitalen Falten und Rhytidosis, einschließlich der oberen und unteren Augenlider
- Nicht invasive Behandlung von Falten und Rhytidosis

Die gleichzeitige Anwendung von Radiofrequenz und Hautvibration durch das THERMAGE® FLX-System und das entsprechende Zubehör ist für folgende Behandlungen indiziert:

- Nicht invasive Behandlung von periorbitalen Falten und Rhytidosis
- Nicht invasive Behandlung von Falten und Rhytidosis

GEGENANZEIGEN

Die Behandlung mit dem THERMAGE® FLX-System ist für Patientinnen und Patienten mit einem implantierten Herzschrittmacher, einem automatischen implantierten Kardioverter-Defibrillator (AICD) oder einem anderen implantierten medizinischen Gerät nicht geeignet, da die Funktionsfähigkeit dieser Geräte durch das während der Behandlung entstehende Hochfrequenzfeld und dessen Einfluss auf den Energiefluss der elektrischen Medizinprodukte beeinträchtigt werden kann.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Ein Überblick über die häufigsten Nebenwirkungen:

- Oberflächenunregelmäßigkeiten: Häufig sind Oberflächenunregelmäßigkeiten nicht unmittelbar nach der Behandlung erkennbar, sondern zeigen sich später (frühestens 1 Monat nach der Behandlung).
- Empfindungsstörungen: Taubheitsgefühle, Kribbeln oder vorübergehende Lähmungserscheinungen, die üblicherweise nach kurzer Zeit wieder abklingen, jedoch bis zu mehreren Wochen anhalten können.
- Verbrennungen, Bläschen, Schuppen und Narben: Das Verfahren bewirkt eine Erhitzung der oberen Hautschichten und kann Verbrennungen sowie anschließende Blasen- und Schorfbildung verursachen. Es besteht ein geringes Risiko der Narbenbildung.
- Klümpchen/Knötchen: Es können, vor allem im Halsbereich, subkutane Knötchen auftreten. Diese klingen normalerweise innerhalb von 1 oder 2 Wochen ohne unerwünschte Folgeerscheinungen ab.
- Pigmentveränderungen: Es kann zu Hyperpigmentierung bzw. dunklen Hautverfärbungen kommen, die jedoch üblicherweise binnen einiger Monate wieder verschwinden.
- Ödeme: Es können Schwellungen auftreten, die sich üblicherweise binnen fünf Tagen wieder zurückbilden, jedoch auch mehrere Wochen anhalten können.
- Leichte bis mittlere Schmerzen: Üblicherweise werden Schmerzen nur während der Behandlung und an der behandelten Stelle empfunden.
- Eine ausführliche Liste der möglichen Nebenwirkungen einschließlich Herpes simplex, Erythemen und Jucken kann dem Benutzerhandbuch entnommen werden.



SOLTA MEDICAL®

www.soltamedical.de

References

1. Walter, W., 2017 Solta Medical® Support for THERMAGE® FLX product feature claims. Bothell. 2. E. Finzi, A. Spangler. Multipass vector (mpave) technique with non-ablative radiofrequency to treat facial and neck laxity. Dermatol Surg. 2005 Aug;31(8 Pt 1):916-22. 3. M. Fritz and al. Radiofrequency treatment for middle and lower face laxity. Arch Facial Plast Surg. Nov-Dec 2004;6(6):370-3. Solta Medical, 2009. 4. Report on Gazelle Clinical Study 09-100-GA-T 'Validation of the Thermage 3.0 cm² STC and DC Frame Tips, Comfort Software and Vibration Handpiece on the Face and Thighs' (#09-019ER). Bothell. 5. S. Jeffrey, et al. Results of a survey of 5,700 patient monopolar radiofrequency facial skin tightening treatments: Assessment of a low-energy multi-pass technique leading to a clinical end point algorithm. Dermatol Surg 2007; 33:900-907. 6. R. Fitzpatrick et al. Multicenter study of non-invasive radiofrequency for periorbital tissue tightening. Lasers Surg Med. 2003;33(4):232-42.

®/™ sind Handelsmarken von Bausch Health Companies Inc oder dessen Tochtergesellschaften. ©2023 Bausch Health Companies Inc. oder dessen Tochtergesellschaften.

Thermage® FLX ist ein Medizinprodukt CE 0344. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung (IFU) / das Benutzerhandbuch für wichtige Produktverwendungs- und Sicherheitsinformationen in Bezug auf Solta Medical Produkte.

Material ausschließlich zur Nutzung durch medizinische Fachkreise bestimmt.

Bausch & Lomb GmbH | Brunsbütteler Damm 165/173 | 13581 Berlin, Germany | Kundenservice DACH: +31-(0) 20-6582754 | cs.dach@solta.com

THR.0017.DE.22